



## Philips DreamStation Go

Dezelfde CPAP-prestaties  
onderweg

Gebruiksvriendelijk  
Weegt ongeveer 854gr  
12-mm micro-flexibele slang

HH1511



# De reis-CPAP opnieuw uitgevonden

Dankzij het strakke ontwerp heeft DreamStation Go een derde minder onderdelen dan andere reis-CPAP's\*. Het biedt echter wel dezelfde therapie- en comfortfuncties waar ruim 5 miljoen CPAP-gebruikers al van profiteren.

### Het kleinste CPAP-apparaat van Philips

- Ingebouwde USB-oplaadpoort
- Heeft weinig ruimte nodig
- Snelle, eenvoudige installatie en eenvoudige navigatie

### Het lichtste CPAP-apparaat van Philips (minder dan 1 kilo)

- Batterij (afzonderlijk verkrijgbaar)

### De kleinste en lichtste slang van Philips\*\*

- Micro-flexibele slang

### Voldoet aan FAA-vereisten\*

- Voor reizen per vliegtuig\*

### Gegevens opslaan voor uw artsen en klinici

- Elk apparaat wordt standaard geleverd met Bluetooth-ondersteuning
- Compatibel met Philips DreamMapper
- MicroSD-kaart afzonderlijk verkrijgbaar.

# PHILIPS

## Reis-CPAP

Dezelfde CPAP-prestaties onderweg Gebruiksvriendelijk, Weegt ongeveer 854gr, 12-mm micro-flexibele slang


# Kenmerken

### Ingebouwde voedingsbron



Dankzij de ingebouwde voedingsbron hoeft u minder onderdelen mee te nemen. Met afmetingen van 15 cm (L) x 15 cm (B) x 5,8 cm (H) past het apparaat zelfs makkelijk in een kleine tas, licht en discreet. U kunt het overal mee naartoe nemen. Een etui voor het masker en de slang is meegeleverd in de reis kit (apart verkrijgbaar).

### Ingebouwde USB-oplaadpoort

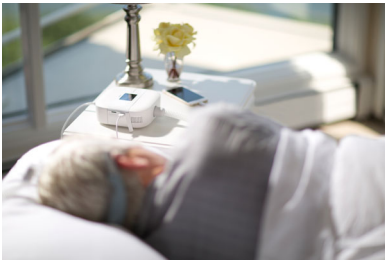

Om mobiele telefoons of andere apparaten eenvoudig op te laden, waarbij uitgangen beschikbaar blijven voor lampen, een wekker, enz. Ideaal voor op reis.

### Voldoet aan FAA-vereisten



Om het u gemakkelijk te maken wanneer u op een luchthaven door de veiligheidscontrole gaat, staat er aan de onderkant van het apparaat een verklaring dat het een medisch

hulpmiddel is en geschikt voor gebruik in een vliegtuig. Het apparaat is geschikt voor gebruik in een vliegtuig wanneer het is aangesloten op een stopcontact of batterij. Neem voor vertrek contact op met de luchtvaartmaatschappij voor informatie over de voedingsbronnen die tijdens de vlucht beschikbaar zijn. Dit apparaat compenseert automatisch voor een hoogte tot 2300 meter. Handmatige aanpassing is niet nodig.

### Intuïtief kleurentouchscreen



Pas de instellingen van het apparaat aan en bekijk therapie-informatie met het kleurrijke en intuïtieve touchscreen van DreamStation Go. Maak gebruik van onze MyStart-functie, waarmee u de begindruk voor de autoCPAP-therapie kunt instellen die voor u het meest comfortabel is. Als de standaard luchtdruk te hoog of te laag voelt terwijl u in slaap probeert te vallen, kunt u de MyStart-drukinstelling naar boven of naar beneden aanpassen, zodat u gemakkelijker in slaap kunt vallen.

### Micro-flexibele slang



Bij uw DreamStation Go is de nieuwe micro-flexibele slang van 12 mm meegeleverd. Deze slang, de kleinste en lichtste die we ooit hebben aangeboden, is makkelijker in te pakken en biedt meer flexibiliteit en

HH1511/00

bewegingsvrijheid terwijl u slaapt. Snelle en eenvoudige klikaansluitingen op elk uiteinde van de slang. Kan via een klein verbindingsstuk aan ons DreamWear-masker worden gekoppeld en bevat een ISO-adapter van 22 mm voor andere maskers.

### Batterij



Als u tijdens uw reis niet over stroom beschikt, kunt u dankzij de batterij van DreamStation Go toch trouw uw therapie volgen, gemiddeld zo'n 13 uur\*\*\* bij een instelling van 10 cm druk. De gebruiksduur van de batterij kan variëren door hogere CPAP-drukinstellingen, extreme lekkage van het masker, hoogte, temperatuur, het opladen van apparatuur via de USB-poort en andere variabelen.

### Bluetooth



U kunt uw voortgang op zowel uw CPAP-apparaat thuis als uw CPAP-reisapparaat volgen en monitoren.

# Specificaties

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische gegevens

- Drukgebied: 4 tot 20 cm H<sub>2</sub>O
- Drukmodus/-modi: CPAP, APAP
- Flex-drukverlichting: 1 tot 3
- Flex-modi: C-Flex, C-Flex+, A-Flex
- Drukverlichtingstijd: 0 tot 45 min. (stappen van 5 min)
- Druk geleidelijk verhogen: Instelbaar per patiënt, slimme drukverlichting
- Afmetingen: 15 cm (L) x 15 cm (B) x 5,8 cm (H)
- Gewicht: 844 g
- Filters: Herbruikbare pollen
- Apparaatinstellingen: Touchscreen met kleurendisplay
- Opslagcapaciteit: MicroSD-kaart (optioneel), Ingebouwd: > 1 jaar
- Meting therapietrouw: Ademdetectie
- Hoogtecompensatie: Automatisch
- Elektrische vereisten: 100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz



Publicatiedatum  
2018-02-26

Versie: 1.1.1

12 NC: 000B LG5 02S15  
UPC: 6 06959 04846 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vergelijken met HDM Z1- en Somnedics Transcend-apparaten (2016).

\*\* Vergelijken met Philips Performance-slang van 22 mm.

\*\*\* Testomstandigheden PAP-gebruiksdur: CPAP-modus, druk: 10 cm H<sub>2</sub>O, slang van 12 mm, 37LPM lekkage, temperatuur: circa 23 °C, hoogte: 4442 m.