



Philips OptiChamber
Diamond
Venttiilillinen tilanjatke ja
maski

Mukana L-koon LiteTouch-maski
Pienikokoinen, tilavuus 140 ml
Yleisimmille astmalääkkeille



HH1308

Auttaa sinua pysymään tilanteen tasalla

Tehostaa lääkkeen annostelua

OptiChamber Diamond -tilanjatkeella entistä suurempi osa lääkkeestä saadaan hengitettyä keuhkoihin. Putken sisäpinta on antistaattista materiaalia, minkä ansiosta aerosoli säilyy putkessa entistä kauemmin ja sisäänhengitykselle jää enemmän aikaa.(1,2)

Tehokas hoito

- Vie lääkkeen keuhkoihin**

Mukavuus

- Lisävarusteena saatava maski myötäilee kasvoja
- Yhden koon suukappale sopii kaikille

Suunniteltu kestävään käyttöön

- Erikoisominaisuudet helpottavat käyttöä ja huoltoa
- Venttiilien matala vastus helpottaa hengittämistä
- Antistaattinen venttiilein varustettu tilanjatke antaa enemmän aikaa

Soveltuu useimmille nestemäisille hengitettävälle lääkkeille

- Soveltuu useimmille nestemäisille hengitettävälle lääkkeille

PHILIPS

Kohokohdat

Vie lääkkeen keuhkoihin



OptiChamber Diamond tehostaa aerosolin annostelua keuhkoihin ja auttaa saamaan parhaan hyödyn hengitettävistä lääkkeistä.

Hengitys kulkee helpommin




Venttiilien vastus on matala, joten ne avautuvat helposti myös lasten matalilla virtausnopeuksilla. Näin lääkkeen hengittäminen tilanjatkeen kautta on vaivatonta sekä sinulle että lapsellesi.*

Yhteensopiva



OptiChamber Diamond on tarkoitettu käytettäväksi usein määrättyjen inhalaattorilääkkeiden kanssa.

Helppo käyttää ja huoltaa

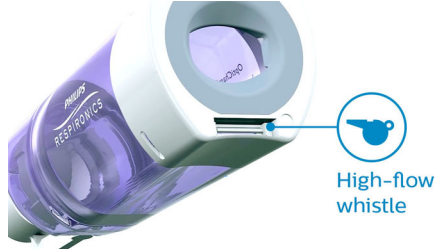

Sovitin pitää inhalaattorin tiiviisti paikallaan ja sisäänrakennettu pilli soi, jos hengität liian nopeasti. Suukappale ja sovitin on helppo irrottaa puhdistusta varten.


Aikaa hengittää



OptiChamber Diamond -tilanjatkeella entistä suurempi osa lääkkeestä saadaan hengitettyä

keuhkoihin. Putken sisäpinta on antistaattista materiaalia, minkä ansiosta aerosoli säilyy putkessa entistä kauemmin ja sisäänhengitykselle jää enemmän aikaa.*1

Mukavuus

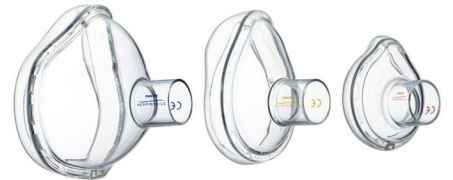

Irrotettavassa LiteTouch-maskissa on pehmeä reunatyyny, joka myötäilee kasvojen muotoja eikä paina. SoftTouch-tiiviste vähentää vuotoja.*:**

Aikuisille ja lapsille



Portaittaisen suukappaleen ansiosta OptiChamber Diamond -tilanjatketta voivat käyttää sekä lapset että aikuiset.

Tekniset tiedot

Tuotteen tiedot

- Tarkoitettu: aikuisille
- Pituus: 14,2 cm (5,6")
- Suukappale: Kiinnittyy 22 mm:n liittimellä
- Tilavuus: 140 ml

Pakkauksen sisältö

- Mukana: L-koon LiteTouch-maski, OptiChamber Diamond

Ylläpito

- Puhdistaminen: Lämmin vesi ja nestesaippua
- Käyttöikä: Vaihda yhden vuoden käytön jälkeen

Materiaali

- Tilanjatke: Akryylintriilibutadieenistyreeni
- LiteTouch-maski: Polyesteri, silikon
- Venttiilit: Silikon



Julkaisupäivä 2018-08-01

Versio: 14.1.2

12 NC: 0000 010 79828
UPC: 3 83735 79828 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* **Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.

* (1)Berlinski A., von Hollen D., Hatley R.H.M., Hardaker L.E.A., Nikander K. Drug delivery in asthmatic children following coordinated and uncoordinated inhalation maneuvers: a randomized crossover trial. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2017, 30(3): 182-189.

* **Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.

* ***Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.