

Philips OptiChamber
Diamond
Ventilförsedd
andningsbehållare och
spacer

Kompakt design 140 ml volym

För vanliga astmaläkemedel
För barn och vuxna
Masktillbehör som tillval



HH1305

Hjälper dig att behålla kontrollen

Utformad för att förbättra tillförseln av läkemedel

Med OptiChamber Diamond kan mer läkemedel tillföras till lungorna. Det antistatiska materialet inuti röret gör att den aerosola medicineringen avges under längre tid, vilket ger dig mer tid att inhalera läkemedlet.(1,2)

Effektiv behandling

- Få läkemedel till lungorna**

Utformad för god effekt

- Specialfunktioner gör den enkel att använda och underhålla
- Ventiler med lågt motstånd gör att du kan andas utan problem
- Antistatisk ventilförsedd andningsbehållare ger dig mer tid

För vanligt förekommande läkemedel

- För vanligt förekommande läkemedel

Komfort

- Tillbehörsmask anpassar sig till ansiktets konturer så att den passar bättre
- Munstycke i en storlek passar alla

PHILIPS

Funktioner


Få läkemedel till lungorna



OptiChamber Diamond är utformad för att förbättra aerosoladministrering till lungorna och kan hjälpa dig att maximera effektiviteten av inhalationsbehandlingar.

antistatiska materialet inuti röret gör att den aerosola medicineringen avges under längre tid, vilket ger dig mer tid att inhalera läkemedlet.*1

Enkel användning, enkelt underhåll

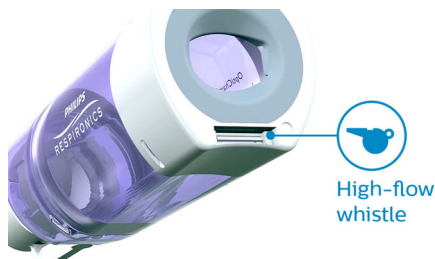

High-flow whistle


Kompatibel



OptiChamber Diamond är utformad för alla vanligt förekommande inhalationsläkemedel.

Andas lättare

Low resistance valves

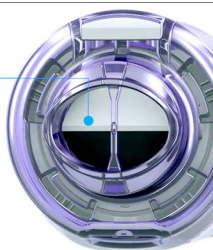

Ventiler med lågt motstånd öppnas obehindrat, även vid låga flödes hastigheter från barn, vilket gör att du eller ditt barn enkelt kan andas genom kammaren.*

Adaptorn håller inhalatorn säkert på plats, medan den inbyggda visselpipan ljuder om du andas in för fort. Både munstycket och adaptorn kan enkelt tas bort för rengöring.

Komfort



För vuxna och barn



Den löstagbara LiteTouch-masken har en mjuk konturformad kudde som enkelt passar och ligger mjukt mot ansiktet för att ge en bekvämare behandling. SoftTouch-tätningen hjälper till att minska läckage.***

Tid att andas



Anti-static chamber

Med OptiChamber Diamond kan mer läkemedel tillföras till lungorna. Det

Optichamber Diamond är utformad med ett stegvist munstycke och kan användas av både barn och vuxna.

Specifikationer

Underhåll

- Rengöring: Varmt vatten och flytande tvål
- Information om livslängd: Byt ut efter ett år

Produktdetaljer

- Längd: 14,2 cm (5,6")

- Munstycke: Gränssnitt med 22 mm kontakt
- Volym: 140 ml

Material

- Kammare: Akrylnitril-butadien-styren
- LiteTouch-mask: Polyester, silikon
- Ventiler: Silikon



Publiceringsdatum
2018-08-01

Version: 10.1.2

12 NC: 0000 010 79820
UPC: 3 83735 79820 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*, 2014, 27(S1): 37-43.

* (1) Berlinski A., von Hollen D., Hatley R.H.M., Hardaker L.E.A., Nikander K. Drug delivery in asthmatic children following coordinated and uncoordinated inhalation maneuvers: a randomized crossover trial. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*, 2017, 30(3): 182-189.

** Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*, 2014, 27(S1): 24-36.

*** Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. *Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del.* 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.