



Philips Sami the Seal
Pædiatrisk
kompressorforstøversyste
m

Bordenhed til hjemmebrug

Behandling udført på 6 - 8
minutter*

*Ved en 2,5 ml dosis salbutamol
Designet til børn

Gør det sjovt at få behandling

Sami the Seal pædiatrisk kompressorforstøversystem er formet som en venlig dyrefigur for at opmuntre dit barn til at tage sin behandling med forstøvet medicin.



HH1304

Specielt designet til børn

- Effektiv, pålidelige og venlig
- Sød og effektiv

Korte behandlingstider

- Behandling udført på 6 - 8 minutter*

Gennemprøvet SideStream-teknologi

- Effektiv indgift af lægemidler
- Producerer konsekvent aerosoler af høj kvalitet

Til almindeligt ordineret medicin

- Kompatibel med almindeligt ordinerede medikamenter

PHILIPS

Pædiatrisk kompressorforstøversystem
Bordenhed til hjemmebrug Behandling udført på 6 - 8 minutter*, *Ved en 2,5 ml dosis salbutamol, Designet til børn

Vigtigste nyheder

Gør det sjovt at få behandling



Sælen Samis kompressorforstøversystem kombinerer styrke og pålidelighed med et børnevenligt design og en sød figur, for at give dig og dit barn en mere brugervenlig behandlingsoplevelse. Kompressoren er vægget i bunden for at give ekstra stabilitet.

Tucker pædiatrisk maske



Vores søde skildpadden Tucker-figurmaske er fremstillet af et blødt, fleksibelt materiale, der former sig om dit barns ansigt til komfort og pasform. Den har desuden indbygget et udluftningsdesign, der hjælper med at føre medicin væk fra dit barns øjne.


Hurtig og effektiv behandling



Vores SideStream nebulisator er specielt designet til at gøre dit barns behandlingstider så korte som muligt. Efterhånden som sælen Sami presser luft gennem slangen, bliver yderligere luft suget ind gennem toppen af nebulisatoren og skaber et hurtigt gennemløb af luftbåren medicin, som barnet kan

inhalere. Behandlingerne kan vare så lidt som 6 minutter*

Gennemprøvet nebulisatorteknologi

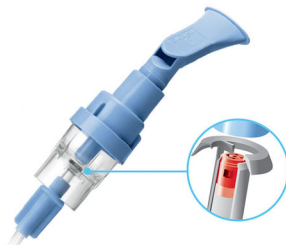

Ensartet indgift af aerosolbehandling i høj kvalitet. SideStream er designet til modstå hyppig og gentagen brug og kan levere dit barns nebulisatormedicin på effektiv vis, indtil det er tid til udskiftning.

Flere konfigurationer



Den mørkeblå SideStream engangsnebulisator kan bruges i 2 uger før udskiftning. Engangsnebulisatoren giver en ensartet indgift af lægemidler gang på gang, og kan bruges med de fleste almindeligt ordinerede aerosolmedikamenter til luftvejssygdomme.

Alsidighed



Sami the Seal er designet til brug med de fleste almindeligt ordinerede aerosolmedikamenter til luftvejssygdomme.

HH1304/00

Specifikationer

Design

- Pålidelig og tiltalende af udseende: Børnevenlig

Driftsparametre

- Maksimalt tryk: 29 - 43,5 psi
- Drifttilstand: Kontinuerlig
- Gennemsnitlig ydeevne flowhastighed: 6 l/min. ved 10 psi
- Termisk sikring: Fungerende temp. 130 grader C

Produktoplysninger

- Vægt: 1,9 kg
- Størrelse: 226 mm x 155 mm x 267 mm
- Garanti: 5 år
- Behandlingstid (6 - 8 minutter*): * 2,5 ml salbutamoldosis
- Elektriske krav: 120 V vekselstrøm - 60 Hz
- Strøm: 120 VA



Udgivelsesdato
2018-07-26

Version: 12.1.2

12 NC: 0000 010 93268
UPC: 3 83730 93268 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

** Ved at bruge en 2,5 ml salbutamoldosis