

PHILIPS

Masque nasal de PPC
Wisp avec harnais

Pack

3 coussins (S/M, L, XL)

HH1024



La performance prend un nouveau visage.

Le joint d'étanchéité ingénieusement conçu pour le Wisp s'adapte automatiquement à chacun de vos mouvements.

Clips magnétiques

- Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque contiennent des aimants

Champ de vision dégagé

- Lire, regarder la télévision ou porter des lunettes

Design compact

- Le masque Wisp s'adapte aisément à plus de 98 % des utilisateurs*

Performance et confort

- Permet une mise en place et un ajustement rapides et faciles.

Caractéristiques

Warning: Magnetic interference

Beware with pacemakers: Read IFU's before use.

Service

Warranty: 90 jours

Design

Compact: Easy fitting and adjustment

Confort: Sangle de tête élastique

Design breveté: Coussin à l'extrémité du nez

Expiration silencieuse: Rotation du coude à 360 degrés

Specifications

Sound pressure level: 19 dBA

N° of parts: Six

Matériau du coussin: Silicone/Polycarbonate

Headgear material: UBL/mousse

d'uréthane/nylon/lycra/nylon thermoplastique

Matériau du circuit: Élastomère de polyester thermoplastique

Frame material: Nylon/Spandex/mousse d'uréthane

Matériau du système de pivotement: Silicone/Polycarbonate

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Matériau du coude/du système de pivotement :: Polycarbonate

Pression de fonctionnement: 4 à 20 cmH2O

Matériau des clips de fixation du harnais: Copolymère acétal

Intent of use


To be used on patients >30kg: with CPAP prescription

Compact

Mise en place et ajustement faciles: Expiration silencieuse

Points forts

Plus grande autonomie

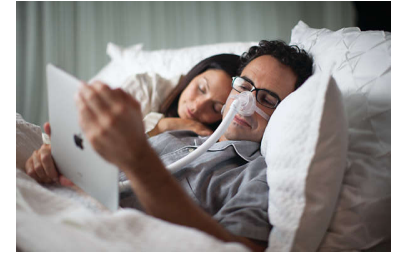

La conception élégante du masque Wisp élimine la nécessité d'un appui frontal, permettant ainsi au patient de bénéficier d'un meilleur champ de vision.

Design compact, port naturel



Le coussin situé à l'extrémité du nez est conçu pour se placer sous l'arête nasale pour offrir un contact minimal et une étanchéité optimale. * Confirmation via la base de données anthropométriques

Design minimaliste, étanchéité optimale



Le design et les attaches du harnais facilitent l'utilisation et le nettoyage.

Clips magnétiques

Contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce masque. Certains appareils médicaux peuvent être affectés par les champs magnétiques. Les clips magnétiques présents dans ce masque doivent être maintenus à une distance d'au moins 50 mm (2") de tout appareil médical actif, avec une attention particulière pour les appareils implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le masque pour plus d'informations.



